

STELLAR^{M22} ✨

LA PLATAFORMA
MULTIAPLICACIÓN
QUE TU PRÁCTICA
DEBE TENER

HACÉ CRECER TU CLÍNICA.
MAXIMIZÁ TUS INGRESOS.



LUMENIS

WWW.LUMENIS.COM

IMAGINÁ LO QUE UNA PLATAFORMA MULTIAPLICACIÓN,
CON 30 DE LOS TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS MÁS VENDIDOS, PODRÍA
HACER POR TUS PACIENTES Y TU CONSULTA...

PRESENTAMOS:

STELLAR^{M22}  TM
BY LUMENIS



LA PLATAFORMA QUE AMPLÍA TU OFERTA ESTÉTICA

Con más de 150 estudios clínicos y más de 50 años de innovación de Lumenis, este sistema multiaplicación ofrece más de 30 soluciones de vanguardia para el cuidado de la piel para cualquier género, edad y tipo de piel.

**Creá tu propia historia de éxito
y elevá tu práctica con resultados**

CLÍNICAMENTE PROBADOS.

INGRESOS DESDE EL PRIMER DÍA

¡Los datos reales de los usuarios revelan que genera nuevos ingresos desde el principio!

EXPANDE TU NEGOCIO

- ❖ Ofrecé más tratamientos a más pacientes
- ❖ Convertite en una solución integral para todas las necesidades estéticas de tus pacientes

CONFIANZA GLOBAL

- ❖ Reconocida por profesionales de todo el mundo por su seguridad y eficacia
- ❖ Líder del mercado con más de 30.000 sistemas vendidos en más de 100 países

PREAJUSTES DE TRATAMIENTO BASADOS EN LA CIENCIA

- ❖ **Modo BÁSICO** con 40 protocolos preestablecidos
- ❖ **Modo NORMAL** con más de 600 preajustes
- ❖ **Modo AVANZADO** para tratamientos totalmente personalizados

AMPLIÁ TU PRÁCTICA OFRECIENDO 4 TECNOLOGÍAS EN 1 DISPOSITIVO

STELLAR™ IPL



UN SOLO APLICADOR VERSÁTIL PARA 23 TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS Y DEPILACIÓN

- Dispositivo IPL de sexta generación, inventado por Lumenis en 1993.
- La tecnología de pulso óptimo (OPT®) controla la forma y la duración del pulso.
- El pulso secuencial múltiple (MSP™) mejora la seguridad y la comodidad del paciente gracias a los intervalos de enfriamiento entre pulsos.
- 9 ExpertFilters™, fácilmente intercambiables en segundos para ofrecer opciones de tratamiento versátiles.
- 3 guías de luz SapphireCool™ garantizan la comodidad del paciente con enfriamiento continuo por contacto.

ResurFX™



SOLO UNA PASADA PARA UN REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO EFICAZ, AHORRA TIEMPO Y PROTEGE LA PIEL DEL PACIENTE

- La única tecnología fraccionada no ablativa real.
- Escáner CoolScan™ de última generación con refrigeración continua por contacto para mayor comodidad del paciente.
- Elegí entre más de 600 combinaciones de forma, tamaño y densidad del área para un tratamiento óptimo, ya sea una sola lesión o todo el rostro.
- Fácil visibilidad de la zona de tratamiento a través de la ventana de la punta SapphireCool™.

Q-Switched Nd:YAG



TONIFICACIÓN DE LA PIEL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE LESIONES PIGMENTADAS Y ELIMINACIÓN DE TATUAJES OSCUROS

- Perfil de haz homogéneo tipo "sombbrero de copa" para una mayor seguridad y eficacia del tratamiento.
- **Tratamientos seguros y eficaces para todo tipo de piel** - Indicados para su uso en aplicaciones que requieren efectos fotomecánicos/fotoacústicos selectivos.
- Un solo cabezal para todas las aplicaciones Q-Switched.
- 7 tamaños de spot para tratamientos personalizados.

Multi-Spot™ Nd:YAG



PARA EL TRATAMIENTO PRECISO DE LESIONES VASCULARES Y VENAS EN LAS PIERNAS EN TODO TIPO DE PIEL

- El pulso secuencial múltiple (MSP™) permite enfriar la piel entre pulsos, reduciendo el riesgo de daño cutáneo al tratar lesiones vasculares. La serie de subpulsos permite una penetración más profunda y una mayor duración del pulso, lo cual es crucial durante el tratamiento.
- 3 guías de luz SapphireCool™, intercambiables en segundos, para mayor comodidad del paciente mediante el enfriamiento continuo por contacto.

MÁS TRATAMIENTOS PARA MÁS PACIENTES



STELLAR™
IPL



ResurFX™



Q-Switched
Nd:YAG



Multi-Spot™
Nd:YAG



Daño solar
(Pigmentación,
manchas solares)



PhotoFractional
(Con IPL)



**Eliminación de
tatuajes oscuros**



**Venas de
las piernas**



**Manchas
de la edad**



**Rejuvenecimiento
de la piel**



Lesiones pigmentadas
(Tipos de piel I-VI)



**Lesiones
vasculares profundas**



Depilación



Cicatrices de acné



**Tonificación
de la piel**



Acné



Estrías



**Lesiones
vasculares faciales**



RESULTADOS SIN PRECEDENTES Y DE LARGA DURACIÓN

NO INVASIVO. ADAPTADO A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES.
TIEMPO MÍNIMO DE INACTIVIDAD.

ANTES



DESPUÉS



TRATAMIENTO VASCULAR CON IPL
Cortesía del Dr. Matteo Tretti Clementoni

ANTES



DESPUÉS



TRATAMIENTO DE ROSÁCEA CON IPL
Cortesía del Dr. Gilly Munavalli

ANTES



DESPUÉS



REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL CON ResurFX™
Cortesía del Dr. Matteo Tretti Clementoni

ANTES



DESPUÉS



Tratamiento Photofractional™ con IPL y ResurFX™
Cortesía del Dr. Matteo Tretti Clementoni

ANTES



DESPUÉS



TRATAMIENTO DE VENAS EN LAS PIERNAS CON Nd:YAG
Cortesía del Dr. José Miguel Montero García

ANTES



DESPUÉS



ELIMINACIÓN DE TATUAJES CON Q-Switched Nd:YAG
Cortesía del Dr. Michael Oeser

ANTES



DESPUÉS DE 3 SESIONES



TRATAMIENTO DEL ACNÉ CON IPL
Cortesía de la Dra. Fabiana Zelaya

Uso Stellar M22 porque es una plataforma médica, me brinda seguridad en los tratamientos y es muy confortable para mis pacientes.
Dra. Fabiana Zelaya



Los resultados pueden variar según las características de cada paciente.

STELLAR M22 IPL

9 FILTROS EXPERTOS | 3 GUÍAS DE LUZ
POSIBILIDADES ILIMITADAS.



515nm
Rosácea,
pigmentación leve



560nm
Vascularización, IPL
Tratamientos de la piel



590nm
Vascularización, tratamientos
cutáneos con IPL, pigmentación,
venas faciales



615nm
Pigmentación, Venas
faciales más grandes



640nm
Depilación,
piel más clara



695nm
Depilación,
piel más oscura



755nm
Depilación, piel
más oscura



Acné
400-600nm &
800-1200nm



Lesiones Vasculares
530-650nm &
900-1200nm



6 mm
(Redonda)



8X15 mm



15X35 mm

INDICACIONES CLÍNICAS:

- Acné
- Poiquilodermia de Civatte
- Verrugas
- Depilación
- Manchas de vino de Oporto
- Malformaciones venosas
- Angiomas
- Lesiones epidérmicas benignas
- Efélides (Pecas)
- Hemangiomas
- Telangiectasias en piernas
- Angiomas de araña
- Discromía
- Lesiones cutáneas
- Eritema de rosácea
- Estrías
- Venas de las piernas
- Lesiones cutáneas
- Melasma
- Telangiectasias faciales
- Hiperpigmentación
- Cicatrices
- Telangiectasias del tronco
- Lesiones cutáneas benignas vasculares

TECNOLOGÍA DE PULSO ÓPTIMO (OPT®)

• Entrega de energía segura:

OPT™ iguala la energía en todo el pulso, reduciendo el riesgo de quemaduras y garantizando un tratamiento más seguro.

• Mejora la comodidad del tratamiento:


Una distribución de energía más controlada brinda procedimientos más suaves y menos dolorosos.

• Logra resultados superiores:

La entrega constante de energía mejora la eficacia, lo que proporciona mejores y más predecibles resultados del tratamiento.

IPL con OPT™

- Stellar M22 IPL con OPT.
- IPL de alta potencia sin OPT.
- Capacidades limitadas de los sistemas de menor potencia.

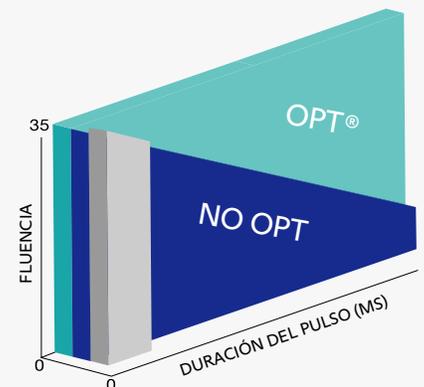



STELLAR M22 ResurFX™

LÁSER DE REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO FRACCIONADO, NO ABLATIVO, CON UNA SOLA PASADA Y MÍNIMO TIEMPO DE RECUPERACIÓN

✦ **TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS**
Más de 600 combinaciones de área, forma, tamaño y densidad.


✦ **TECNOLOGÍA AVANZADA**
Microhaces precisos, homogéneos y uniformes para resultados predecibles y reproducibles.

✦ **EFICIENTE Y RENTABLE**
Sin consumibles, lo que mejora la rentabilidad de la práctica.

✦ **DISEÑO CENTRADO EN EL PROFESIONAL**
Visibilidad clara del área de tratamiento, gracias a la punta SapphireCool™, para mayor seguridad y precisión.

FORMAS de ResurFX™ CoolScan™:

6 formas diferentes, con tamaños y densidades modificables desde la interfaz de usuario, permiten una mayor precisión y control del tratamiento.

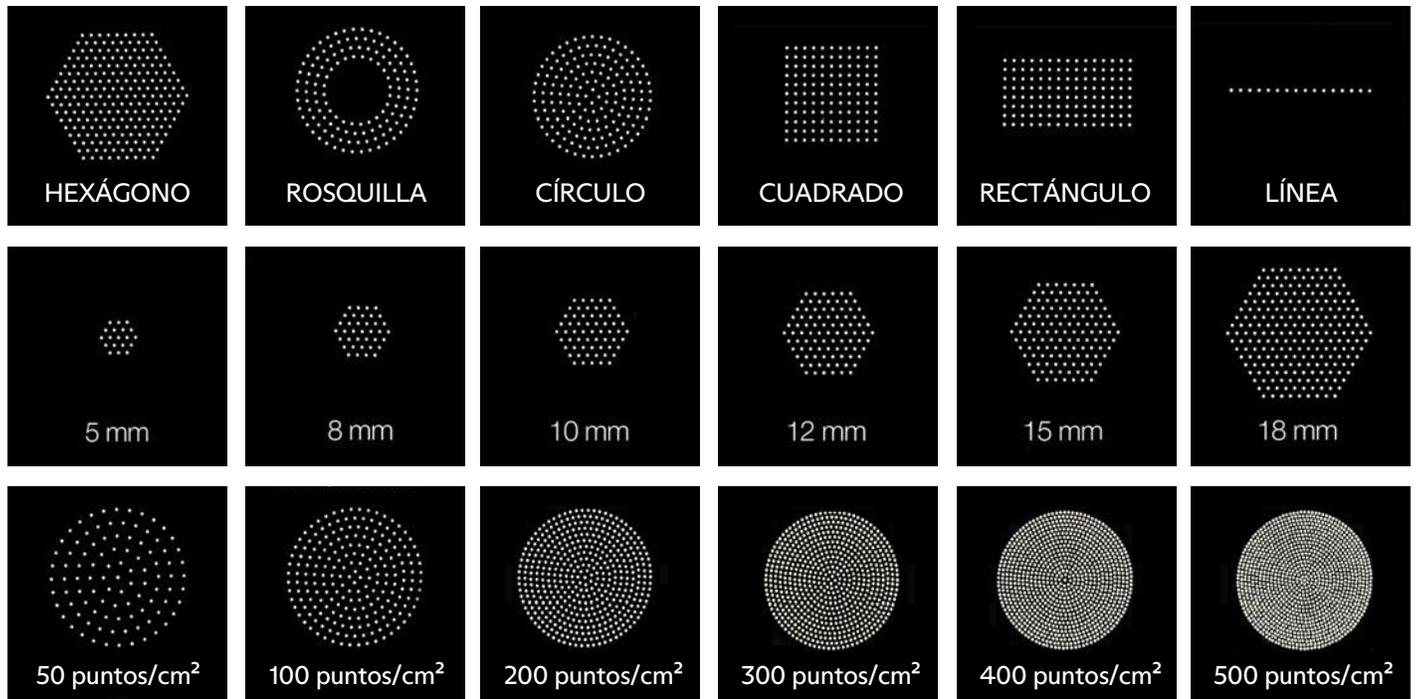

STELLAR M22 Multi-Spot™ Nd:YAG

TRATAMIENTOS VASCULARES PRECISOS
CON TAMAÑOS DE SPOT VARIABLES PARA
OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS

Tratamiento preciso y cómodo con **3 guías de luz refrigeradas** y fácilmente intercambiables.



TAMAÑO DEL SPOT
2mm X 4mm



TAMAÑO DEL SPOT
6mm



TAMAÑO DEL SPOT
9mm



Máxima seguridad en el tratamiento con la tecnología MSP™ y parámetros preestablecidos para garantizar tratamientos seguros y uniformes en cada ocasión.

PULSO SECUENCIAL MÚLTIPLE (MSP™)

• Entrega más energía de forma más segura:

MSP™ divide la energía en múltiples pulsos, permitiendo que el tejido circundante se enfríe entre pulsos. Esto garantiza una entrega de energía más segura, profunda y elevada, sin riesgo de dañar la piel.


• Mejora la comodidad del tratamiento:

Al enfriar el tejido entre pulsos de luz, la tecnología MSP™ minimiza las molestias durante los tratamientos, creando una experiencia más placentera para sus pacientes.

• Proporciona resultados consistentemente superiores:

Un control preciso de la energía garantiza un tratamiento uniforme, lo que se traduce en resultados más consistentes y duraderos.

✦ Mejora la eficacia en la eliminación de lesiones vasculares*

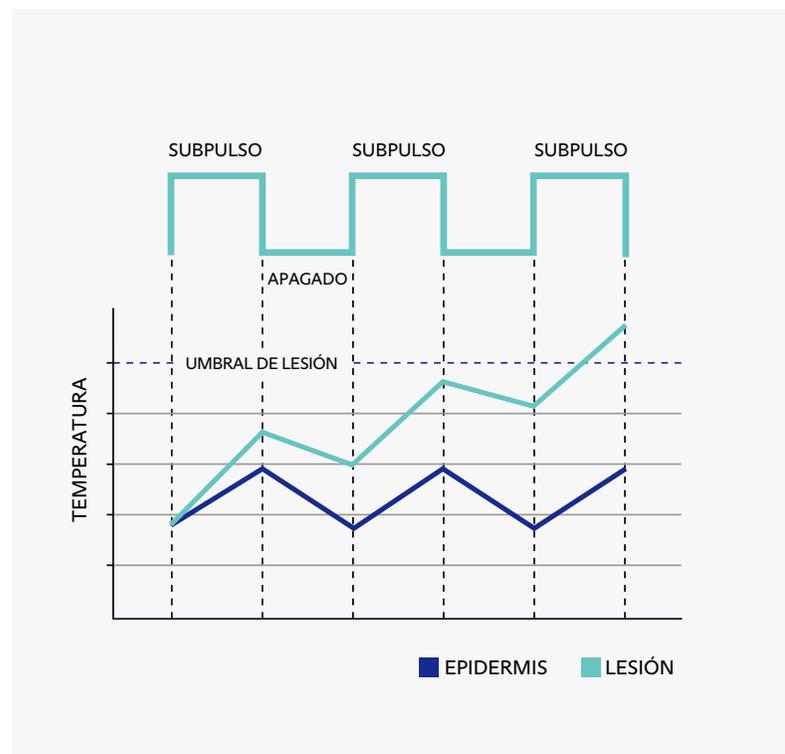

*Pavan K. Nootheti, MD; Kimberly A. Pettit, MD; Gail Yosowitz, BS; Mitchel P. Goldman, MD. Mejora clínica de la piel fotodañada tras un único tratamiento con luz pulsada intensa. The American Journal of Cosmetic Surgery, vol. 24, n.º 1, 2007.



STELLAR M22™ Q-Switched Nd:YAG

LÁSER ACÚSTICO NO TÉRMICO DE ALTA POTENCIA PARA LA ELIMINACIÓN DE PIGMENTOS MEDIANTE ONDAS DE CHOQUE EN LUGAR DE CALOR.

SEGURO PARA TODO TIPO DE PIEL

7 tamaños de spot para tratamientos personalizados, 4 de los cuales también están disponibles como puntas desechables



2mm

2.5mm

3.5mm

5mm



2mm



2.5mm



3.5mm



4mm



5mm




6mm




8mm

VENTAJAS DEL PERFIL DEL HAZ "SOMBRERO DE COPA"

- ❖ Mayor seguridad en el tratamiento al evitar el calentamiento masivo mediante el homogeneizador.
- ❖ El perfil de haz tipo "sombrero de copa" minimiza el daño epidérmico, los cambios en la textura del tejido y la aparición de cicatrices.
- ❖ La falta de un homogeneizador podría provocar puntos calientes dentro del haz y un mayor riesgo de cicatrices.

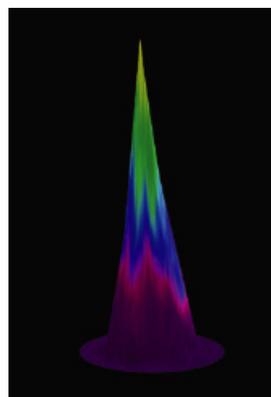

Vista lateral del perfil del haz sin homogeneizador

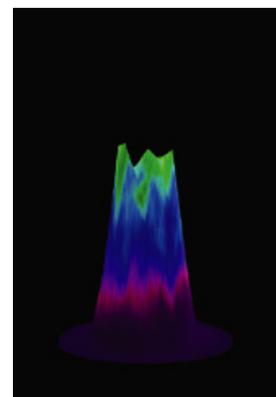

Vista lateral del perfil del haz con un homogeneizador para un haz de "sombrero de copa"

TU VIAJE CON LUMENIS ACABA DE COMENZAR

Queremos que tu negocio crezca con Lumenis. Por eso, hemos diseñado un paquete de apoyo que comienza con la primera conversación y te acompañará hasta que tu negocio empiece a disfrutar de los beneficios. Este paquete garantiza toda la formación necesaria y el acceso a los materiales clínicos más actualizados. Stellar M22 se mantiene como el tratamiento de elección cuando se trata de tratamientos láser y de luz para la piel.



LOCALIZADOR DE CONSULTORIOS LUMENIS

Miles de pacientes buscan proveedores de tratamiento cada mes. Ayúdalos a encontrar tu clínica registrándola en el Localizador de Clínicas de Lumenis.
<https://www.medsystems.com.ar/clinicas/>



LUMENIS ONLINE

Los consumidores tienen muchas preguntas sobre los tratamientos. Nuestro sitio web, diseñado específicamente para pacientes, les brindará la tranquilidad y la confianza que necesitan para seguir adelante con los tratamientos.



ENTRENAMIENTO EN EQUIPO

Instalamos el sistema y capacitamos a tu personal para que puedan evaluar los tipos y afecciones de la piel, creando el plan de tratamiento perfecto para cada paciente. Gracias a la capacitación clínica, podrán personalizar los tratamientos con confianza.



AMPLIA RED DE SERVICIOS

Nos comprometemos a brindar un servicio integral y de alta calidad para la reparación y el mantenimiento de equipos médicos. El servicio de Lumenis te brinda tranquilidad para que puedas concentrarte en el cuidado del paciente, en lugar de en el equipo.



PROMOCIONÁ TU CLÍNICA

Como cliente de Lumenis, tendrás acceso al Portal Médico de Lumenis. Aquí encontrarás materiales como folletos y pósteres, además de acceder a una gran cantidad de información clínica y de productos.



TU RECURSO MÁS VALIOSO

Tu representante personal está a tu disposición por correo electrónico, mensaje o llamada telefónica. Queremos que te sientas parte de la familia Lumenis, así que no dudes en contactarnos cuando quieras. Siempre haremos todo lo posible por responderte cuanto antes.

ESPECIFICACIONES

Stellar IPL™

ESPECTRO	400-1200 nm
Filtros expertos	Acne (400-600 & 800-1200); Vascular (530-650 & 900-1200); 515 nm, 560 nm; 590 nm; 615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm;
FLUENCIA	Hasta 56 J/cm ²
DURACIÓN DEL PULSO	4-20 ms
DELAY DEL PULSO	5-150 ms
CARACTERÍSTICA DEL PULSO	Pulso secuencial múltiple
TASA DE REPETICIÓN	Hasta 1 Hz
TAMAÑO DEL SPOT	35x15 mm ² ; 15x8 mm ² , 6mm
ENFRIAMIENTO	Refrigeración por contacto continuo

MultiSpot™ Nd:YAG

LONGITUD DE ONDA	1064 nm
FLUENCIA	10-225 J/cm ²
DURACIÓN DEL PULSO	2-20 ms
DELAY DEL PULSO	5-100 ms
CARACTERÍSTICA DEL PULSO	Pulso secuencial múltiple
TASA DE REPETICIÓN	Hasta 1 Hz
TAMAÑO DEL SPOT	6 mm; 2x4 mm ² ; 9 mm
ENFRIAMIENTO	Refrigeración por contacto continuo

ResurFX™

LONGITUD DE ONDA	1565 nm
ENERGÍA DE PULSO	10-70 mJ por microhaz
CARACTERÍSTICA DEL PULSO	CoolScan™ Scanner
FORMAS DE PATRONES	Línea horizontal, línea vertical, cuadrado, rectángulo horizontal, rectángulo vertical, círculo, rosquilla, hexágono
DENSIDAD DEL HAZ	50-500 microhaces/cm ²
TASA DE REPETICIÓN	0.5-2 Hz
TIP	SapphireCool; Precisión
TAMAÑO DEL SPOT	Hasta 18 mm
ENFRIAMIENTO	Refrigeración por contacto continuo

Q-Switched Nd:YAG

LONGITUD DE ONDA	1064 nm
FLUENCIA	0.9-14 J/cm ²
DURACIÓN DEL PULSO	6-8 ns
CARACTERÍSTICA DEL PULSO	Sombrero de copa
TASA DE REPETICIÓN	0.5-5.0 Hz
TAMAÑO DEL SPOT	2; 2.5; 3.5; 4; 5; 6 y 8 mm

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

DIMENSIONES [sin ResurFX]	51 x 56 x 52 cm (21 x 22 x 20,5 pulgadas)
DIMENSIONES [con ResurFX]	51 x 56 x 65 cm (21 x 22 x 25,6 pulgadas)
PESO [sin ResurFX]	45 kg / 99,2 libras
PESO [con ResurFX]	60 kg / 132,3 libras
REQUISITOS ELÉCTRICOS	100-240 V CA ±10 %, 12 A máx., 50/60 Hz, monofásico, línea dedicada

ADVERTENCIAS Y RIESGOS

Al igual que con cualquier láser o IPL, se debe tener el cuidado adecuado para garantizar un uso seguro y correcto. El manual del operador del Stellar M22 debe revisarse y comprenderse a fondo antes de operar este equipo. El sistema Stellar M22, que incluye Stellar IPL, Multi-Spot Nd:YAG, Q-Switched Nd:YAG y ResurFX, está contraindicado en pacientes con infecciones activas, enfermedades virales, fúngicas o bacterianas. También está contraindicado en pacientes con trastornos o afecciones inflamatorias de la piel. Tené en cuenta que el IPL y el láser pueden causar lesiones epidérmicas. El riesgo aumenta con una mayor fluencia/energía y pigmentación de la piel. El uso de Stellar M22 podría causar enrojecimiento, hinchazón, cambios en la pigmentación y cicatrices. Consultá el manual del usuario del sistema para obtener una lista completa de contraindicaciones y riesgos.

© 2025 Lumenis Be Ltd. Todos los derechos reservados. El Grupo de Empresas Lumenis. Lumenis, su logotipo, Stellar M22, Stellar IPL, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, ExpertFilters, guías de luz SapphireCool, Photofractional, ResurFX y CoolScan son marcas comerciales o marcas registradas del Grupo de Empresas Lumenis. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lumenis cuenta con la certificación ISO 13485:2016.

LUMENIS BE LTD.
Yokneam Industrial Park
Hakidma Street,9. ISRAEL
P.O.B 426
Yokneam 2069236



Venta y asistencia técnica autorizada

Av. Belgrano 1217, Piso 9, Oficina 91. Montserrat, CABA, Argentina
contacto@medsystems.com.ar

Buenos Aires: 11-5858-9898 | Interior: 11-6125-6127

f /medsystems.argentina | @ /medsystems.argentina



© LUMENIS BE LTD. 2025 0483 Rx ONLY

PB-00085660 Rev A

LUMENIS

